


bioCELL

LINHA DE

CONTADORES DE COLÔNIAS

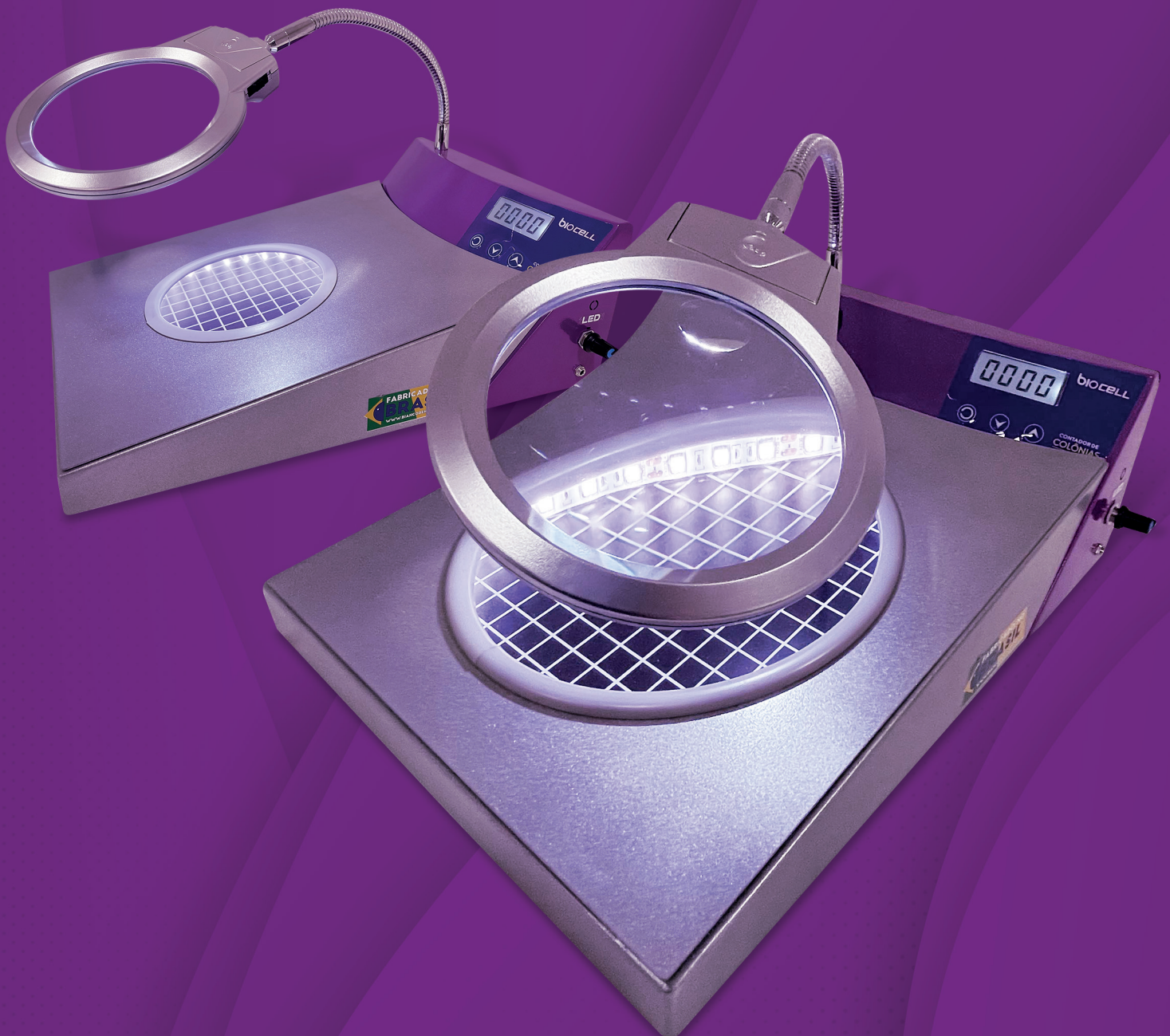

Produzidos e distribuídos por

biancodent

www.biancodent.com.br

bioCELL

Contadores

Contador de Colônias

Modelo: BIOCC-BI



Imagens meramente ilustrativas.



CÁPSULA PARA
CANETA DE
CONTAGEM

Compatível com canetas
até Ø10mm



A PRESENTAÇÃO

Os Contadores de Colônia **bioCELL** são equipamentos muito importantes em estudos na área de microbiologia, próprios para visualização de variadas colônias de bactérias. São equipamentos flat e possuem um design moderno e inovador.

DESTAQUES:

- Fonte de luz interna em LED, criando uma perspectiva ideal que ajuda o operador na contagem de bactérias de difícil visualização;
- Contador digital com possibilidade de contabilizar as colônias diretamente nos botões do painel ou através da caneta de contagem.
- O equipamento emite um sinal sonoro durante a contagem;
- Caneta de contagem com sistema de cápsula, possibilitando que o usuário possa colocar canetas de sua preferência (até Ø10mm, consultar medidas compatíveis) para serem utilizadas durante as contagens;
- Lupa superior com aumento de 3X com braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa.




Os Contadores de Colônias BIOCC podem ser adquiridos com as placas:


- 110001020A - para Placas de Petri 90mm
- 110001030A - para Placas de Petri 150mm

As placas de visualização deverão ser solicitadas separadamente.

EQUIPAMENTO 2 EM 1:

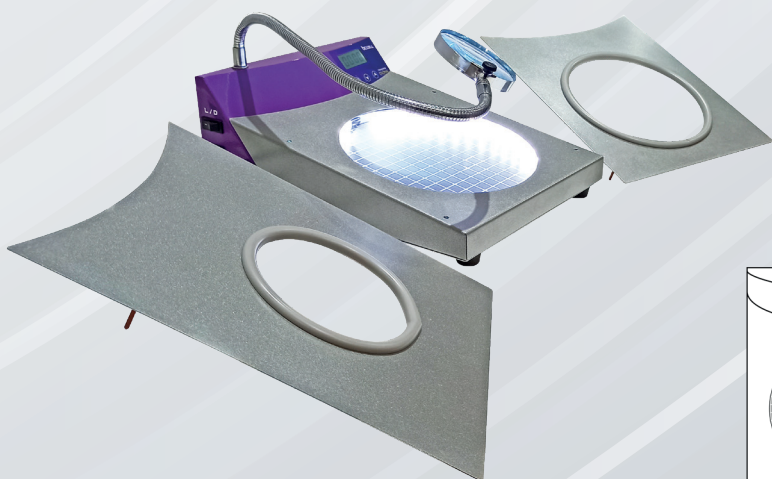

O Contador de Colônias **bioCELL** tem a possibilidade de alternar as placas de visualização entre Ø90mm e Ø150mm sem a necessidade de adquirir um novo equipamento. A troca é simples, rápida e ainda proporciona um excelente custo-benefício ao usuário.

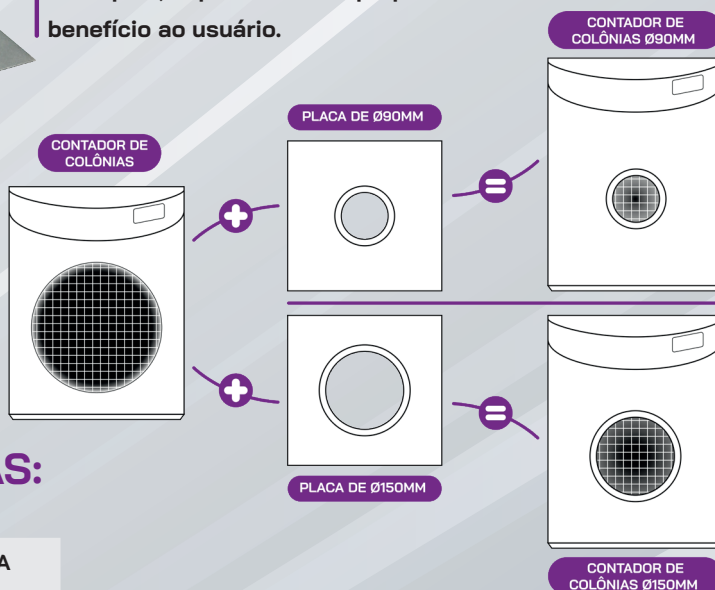

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO DA PLACA	110001020A	110001030A
DIÂMETROS DAS PLACAS	Ø90mm	Ø150mm
CAPACIDADE DO CONTADOR	0 ~ 9999	
AMPLIAÇÃO	3X	
TENSÃO	Bivolt	
POTÊNCIA	25W	
PESO	3,8kg	
DIMENSÕES (L X P X A) cm	26,5 x 34,8 x 13,3 cm	

A COMPANHA O EQUIPAMENTO

- 1 Contador de Colônia
- 1 Caneta de contagem
- 1 Placa de visualização de Ø90mm ou 1 Placa de visualização de Ø150mm (definido pelo comprador)

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

bioCELL